



水素吸入器の購入・レンタル

**MAKE MEDICAL株式会社**

自社設計、自社製造、製造直販メーカー

## 世界最大級の水素発生量で 不可能を可能に！

水素吸入器で多くの方に健康になってもらうこと。

これが弊社の使命です。

そして出来る限り安価にお届けさせていただくこと。

これが役割だと思っております。

心身ともに 健康であること。

とても大切だと思っております。

みなさんが健康であり続けるために

また、健康になるためにお役に立てる機器、メソッドを  
提供して行きたいと考え、商品を開発、製造しています。



## 商品紹介 水素吸入器 -MEGAシリーズ-

水素発生量の違いで、5種類あります。

水素のパワーは、活性酸素の除去とミトコンドリアの活性化です。

ミトコンドリアは、人間のエネルギーの90%以上を作り出している最小器官です。

そして、世界最小の水素の濃度勾配によるモーターです。

水素を吸入すると、このモーターが多く回転し、

万能エネルギーATPを多く産生します。

だから、水素吸入なんです！



商品ページ



### MEGA600 298,000円

水素発生量600ml/分、酸素発生量300ml/分  
水素濃度99.99%以上、酸素濃度99.9%以上  
サイズ：22×32×34cm、キャスター付き9kg  
MEGA600は、健康な方向けです。  
病気等でお悩みの方は、  
MEGA2400以上をお勧めします。



商品ページ



### MEGA1200 458,000円

水素発生量1200ml/分、酸素発生量600ml/分  
水素濃度99.99%以上、酸素濃度99.9%以上  
サイズ：22×32×34cm、キャスター付き10kg  
1台2役！水素と酸素の同時吸入、水素のみの吸入も可能です。添加剤ゼロ。純水、もしくは精製水しか使いません。病後のケアに、疲れやすい方に、健康が気になる方に。  
MEGA600と同じボディサイズで水素発生量は、2倍の1200ml/分です。



商品ページ



### MEGA2400 728,000円

水素発生量2400ml/分、酸素発生量1200ml/分  
水素濃度99.99%以上、酸素濃度99.9%以上  
サイズ：28×36×50cm、キャスター付き13kg  
水位自動停止センサー付で安心！  
水質センサー内蔵・水素発生量切替機能付  
2400→1200と切替ができます。



商品ページ



### MEGA3600 988,000円

水素発生量3600ml/分、酸素発生量1800ml/分、水素濃度99.99%以上  
酸素濃度99.9%以上、サイズ：30×40×50cm、キャスター付き17kg  
MEGA3600は、病気等でお悩みの方ぜひご利用ください。  
水止め付カニューラ4個付。精製水10L1箱サービスご家庭のコンセントで利用できる水素発生量最大級の水素吸入器です。



商品ページ



### MEGA4800 1,288,000円

水素発生量4800ml/分、酸素発生量2400ml/分、水素濃度99.99%以上  
酸素濃度99.9%以上、サイズ：40×55×60cm、キャスター付き24kg  
お届けから1か月間、返金・返品保証付きです。保証期間1年です。  
日本最大級の水素発生量の水素吸入器です。専用コンセントが必要です。

## 返品・返金について

お届けから1か月以内であれば、返金させていただきます。お客様都合による返品の場合は、元払いにて返送ください。

返送いただき、機器、付属品の傷、損傷、稼働の有無を確認させていただき問題がある場合は

修理費用を相殺させていただきます。消耗品については、ホームページに掲載させていただいている

お値段で相殺させていただきます。お試し2週間、レンタルから切り替えの方は、対象外となります。



返品・返金について

## 水素吸入器の事例

圧倒的な水素発生量で喜びの声をたくさん頂いております。

血流改善

慢性COPD

糖尿病

肺癌

肺気胸・肺水腫

肺腺がん

副鼻腔炎

腎臓病

変形性膝関節症

コレステロール値

乾癬

卵巣がん

コロナ後遺症

甲状腺腫れ

網膜浮腫

低血圧症



詳しい事例は  
こちらから


## 水素の持つパワー

- ✓ 抗酸化作用（老化・病気予防）
- ✓ 疲労回復・エネルギー向上
- ✓ 抗炎症作用（慢性疾患リスク低減）
- ✓ 脳機能改善（認知症予防・ストレス軽減）
- ✓ 血流改善・代謝促進
- ✓ 美容・アンチエイジング

といった幅広い効果が期待できます。

水素吸入のメカニズムとして、水素の体内拡散・活性酸素の中和・ミトコンドリアの活性化・血流改善などが科学的に証明されつつあります。

H2メディカルパワーは、世界最大級の水素発生量により、高い効果を得ることができる点が強みです。

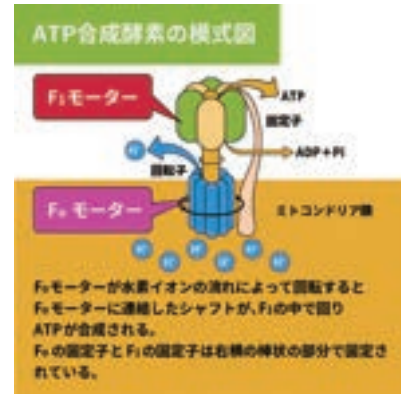

水素の持つ  
パワー

## 水素吸入器の選び方

水素吸入器の選び方ですが重要なポイント5つ。

水素発生量・水素濃度・添加物ゼロ・電気用品安全法適合製品  
高圧ガス保安協会水電解装置規定適合製品です。



水素濃度測定  
データ



水素吸入器の  
選び方

### 01.水素発生量

2000ml/分を超える水素発生量の水素吸入器はとて少なく、あっても高額で、とても簡単に購入できる機器ではありませんでした。ちなみに、大手さんの水素吸入器は、1200ml/分です。220万円以上だそうです。病気で困っているとはいえ、とても高額で・・・

**体調に合わせた水素発生量が大事**

### 02.水素濃度

いろんな水素吸入器があります。どれを選んだらいいか、迷ってしまいますね。特に濃度表示です。いろんな単位で表示されていて、わかりづらいですね。濃度の選ぶポイントは、パーセント%で表示されている

**99.99%以上をお選びください**

※東証プライム企業測定

### 03.添加物ゼロ

高純度精製水だけを使用して電気分解をします。だから、安心！安全です。添加物（苛性ソーダ等）を溶解した水溶液を使用した電気分解は、電気分解時、添加物がミストとなり、ガス内に交ります。それをストラップして、ストラップボトル内の精製水に残留している可能性がありますのでご注意ください。

### 04.電気用品安全法適合製品

特定電気用品以外の電気用品マーク。医療用物質生成器として適合製品です。電気用品の製造または輸入事業を行うには国への事業届出基準適合確認、自主検査を行い販売にあたっては適合性検査の受検（特定電気用品の場合に限る）、表示を行わなければなりません。

### 05.高圧ガス保安協会水電解装置規定適合製品

水を電気分解にて水素ガスを生成する装置に対して緊急自動停止が義務付けられました。全機種 緊急自動停止機能付 です。水素ガスの圧力が上昇すると自動的に機器が停止します。

## ■ お試し2週間 ご利用いただけます。



「お試し2週間」使用料無料で、お試しいただけます。

お預り金と送料(概算です)

お試し2週間

### ■ お試し専用機器で1回1機種のみになります

傷、損傷があった場合、お預り金より相殺させていただきます。  
お預り金以上の損傷、修理費用の場合、  
別途ご請求をさせていただく場合があります。

### ■ 精製水は

弊社にて手配させていただき ご返却後、  
お預り金より相殺させていただきます。  
MEGA600～MEGA3600 10L 1箱 1800円  
MEGA4800 10L 2箱 3600円 です。  
ご利用後、補充分はお客様の方でご手配いただきます。



サンエイ化学  
株式会社  
ホームページ

機種	お預り金 (非課税)	概算送料 (往復)
MEGA600	30,000円	4,000円
MEGA1200	50,000円	4,000円
MEGA2400	80,000円	5,000円
MEGA3600	120,000円	6,000円
MEGA4800	150,000円	8,000円

## ■ 安心、選べる、レンタル、ご購入！

### MEGAシリーズ

600 1200 2400 3600 4800

全ての水素吸入器のレンタルが可能です。

健康維持の向上、疾病でお悩みの方、難病・重病でお悩みの方  
クリニック・サロンを経営の方など、ぜひお試しください。

### ご購入とレンタルのご案内

価格は全て税込み

機種	販売価格 税込・送料込み	レンタル料/月 クレジットカード決済 定期課金	レンタル お預り金 終了時・ご返金
MEGA600	298,000円	16,000円	30,000円
MEGA1200	458,000円	30,000円	50,000円
MEGA2400	728,000円	45,000円	80,000円
MEGA3600	988,000円	60,000円	120,000円
MEGA4800	1,288,000円	80,000円	150,000円



### ■ ご購入の場合 (ご準備いただく物なく、ご利用いただけます。)

MEGA600/1200/2400/3600 精製水 10L 1箱 MEGA4800 精製水 10L 2箱  
1～2週間で発送させていただきます。



ご購入はこちら

### ■ レンタルの場合 (ご準備いただく物なく、ご利用いただけます。)

最短1か月からご利用いただけます。メールによる電子契約で、簡単です。  
レンタル契約、お支払い完了後、1～2週間で発送させていただきます。



お申し込みは  
こちら

## MEGAシリーズが選ばれる理由

### 水素発生量

1分間に発生している水素ガスの量です。MEGAシリーズは600ml/分～4800ml/分まで水素吸入器H2メディカルパワー®MEGA600 600ml/分は、健康な方向けにおすすめしています。疾病対策には、MEGA2400以上をおすすめします。

### 酸素発生量

300～2400ml/分、酸素濃度排出口にて酸素97～99%+水素1～3% 水素と同時吸入がおすすめです！

### 水素+酸素ダブル吸入

水素ガスと酸素ガスを別々に取り出して分岐管で同時吸入がおすすめです！濃い水素の役割と濃い酸素の役割でダブルパワーで、吸入します。

### 添加物・オゾンガスゼロ

高純度精製水だけを使用して電気分解をします。添加物（苛性ソーダ等）を溶解した水溶液を使用した電気分解は、電気分解時添加物がミストとなり、ガス内に交ります。ストラップして、ストラップボトル内の精製水に残留している可能性はありますのでご注意ください。

### 静音追求 45db

選抜いた静音ファンモーター、静音冷却ユニットを使用。  
※MEGA600の測定値です。お休み中も安心な静かさです。


### 各種センサー内蔵

水位上下センサー・水温センサー・水質センサー標準装備。モニターとアラーム音でお知らせ自動停止します。衝撃、横倒自動停止

### 長期的交換部品

電解ユニット5000～8000時間ほどで交換です。  
徐々に水素発生量が低下していきます。

### 電気用品安全法適合製品

特定電気用品以外の電気用品マーク   
医療用物質生成器として適合製品です。  
電気用品の製造または輸入事業を行うには国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い販売にあたっては適合性検査の受検（特定電気用品の場合に限る）、表示を行わなければなりません。

### 安心！安全！

安全にご利用いただくために、独自の水素ガス安全排出機構搭載。タンク内防爆機能搭載。特許取得。

### 水素濃度

水素濃度99.99%以上の機器をお選びください水素吸入器H2メディカルパワー®MEGAシリーズは東証プライム企業測定99.99%以上の水素濃度です※ppmで表示している機器は、ご注意ください。1ppmは0.0001%です。99.99%は、999900ppmになります。

### 低価格

◎自社設計◎自社組立◎代理店レスの製造直販。  
だから、高性能！で低価格を実現しています。

### 大型LEDタッチパネル

大きく、見やすくわかりやすく表示されるタッチパネル。  
ブルーLEDで暗い室内でも見えやすくタッチするだけで簡単操作ができます。

### 純チタン+プラチナコーティング

重要パーツの電解ユニットの電極は、「純チタン+プラチナコーティング」安心に！安全に！お使いいただけるように！  
そして、長持ち高耐久！  
※ステンレス製の電極を使用している機器はご注意ください。

### デイリーメンテナンスフリー

日々のメンテナンスは必要ありません。  
使用時間 約100時間毎に精製水を交換していただきます。

### 安心の1ヶ月返品返金保証&1年保証

1か月以内であれば返品・返金いたします。  
もちろん、1年保証付。オプションで延長保証もあります。

### 無料体験で安心

弊社東京本社にて無料体験できます。ぜひ体験してください。  
事前予約をお願い致します。

### 高圧ガス保安協会 水電解装置規定適合製品

水を電気分解にて水素ガスを生成する装置に対して緊急自動停止が義務付けられています。  
全機種 緊急自動停止機能付です。  
水素ガスの圧力が上昇すると自動的に機器が停止します。

### 転倒・衝撃時 自動OFF機能搭載

機器が点灯した場合、大きな衝撃を受けた場合  
運転が自動で停止します。地震時も安全です。

## MEGAシリーズ



### 水素吸入無料体験

弊社東京本社にて無料体験できます。機器を見て、触って、吸入体験。

ご質問等、お気軽にお問い合わせください。1時間たっぷり水素吸入をお楽しみいただけます。

#### アクセス

銀座本社&水素吸入無料体験ショールーム  
〒104-0061 東京都中央区銀座5-14-3  
MAKEビル【銀座5丁目ビル】  
歌舞伎座はぼ目の前



Googleマップ

#### ご予約はこちら

事前にご連絡をお願いします。

TEL:03-6824-4399



ネット予約



LINE予約



### 他者との比較

	弊社	他社 A	他社 B	他社 C
水素発生量	1200ml/分	1200ml/分	200ml/分	80ml/分
水素濃度	99.99% 以上	99.9%	99.9%	99.9%
サイズ cm	22×32×34	36×42×60	35×31×16.3	12×22×23
重量 kg	10kg	39kg	記載なし	記載なし
価格(税込)	458,000	2,200,000	990,000	376,000

# MEGAシリーズ製品仕様一覧

	MEGA600	MEGA1200	MEGA2400	MEGA3600	MEGA4800
水素発生量	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	2400ml/分±10%	3600ml/分±10%	4800ml/分±10%
水素濃度	99.99%以上 (99万ppm以上)※東証プライム企業測定				
酸素発生量	300ml/分±10%	600ml/分±10%	1200ml/分±10%	1800ml/分±10%	2400ml/分±10%
酸素濃度	99.9%以上				
精製水消費量	約25cc/時間	約50cc/時間	約100cc/時間	約150cc/時間	約200cc/時間
精製水	弊社指定精製水 サンエイ科学 高純度精製水				
添加物	不使用				
吸入気体	水素&酸素				
連続使用時間	5時間 8時間				
電解ユニット寿命	5000時間以上				
電解ユニット 交換費用(税込・送料別)	8万円	12万円	18万円	27万円	35万円
水素発生モニター	○	○	○	○	○
水位センサー	○	○	○	○	○
水質センサー	○	○	○	○	○
温度センサー	○	○	○	○	○
定格電圧・周波数	100V 50/60Hz				
安全装置	タンク蓋安全弁、圧力異常自動停止機能				
定格電流	4A	5A	9A	12A	17A
重量	9kg	10kg	13kg	17kg	24kg
サイズ	22×32×H34cm		28×36×H50cm	30×40×H50cm	40×55×H60cm
付属品	カニューラ4個(お試し・レンタルは1個)/取扱説明書 精製水(ご購入:600・1200・2400・3600 10L 1箱。4800 10L 2箱) (お試し・レンタル:600・1200・2400・3600 10L 1箱。4800 10L 2箱)				
保証期間	1年				
長期消耗品	ミクロンフィルター/年、イオン除去フィルター/年、電解ユニット/5000時間以上				
延長保証費用/年	3万円	5万円	7万円	8万円	10万円
価格(税込・送料込)	298,000円	458,000円	728,000円	988,000円	1,288,000円
レンタル/月(税込)	16,000円	30,000円	45,000円	60,000円	80,000円
レンタルお預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円
お試し2週間お預り金	30,000円	50,000円	80,000円	120,000円	150,000円

※延長保証は、電解ユニットの保証は含みません。お届けから1か月以内にお申込みください。

※仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。ご了承の程よろしく申し上げます。

※MEGA4800 は、単相100V20A、もしくは、単相200V10A の専用コンセントのご準備が必要になります。詳細は右QRコードをご覧ください。



専用コンセント

## ■ 設置頂いている医療機関・サロン・クリニック・導入店

■ くまもと  
免疫統合医療クリニック



■ 神戸低侵襲  
がん医療センター



その他  
設置店さんは  
こちら

■ TOKYO  
免疫統合医療クリニック



■ HOHOサロンcoco (三重)



## ■ 精製水のご案内とランニングコスト

弊社指定精製水のみご利用いただけます。

### 初回

無料でお届けさせていただきます。

### 2回目以降

お客様の方で、精製水メーカーに  
ご注文ください。TEL:0120-724-729

### 【精製水の交換】

1か月毎、もしくは、1か月以内に使用時間100時間を超えた時は精製水を交換します。

機種	MEGA600	MEGA1200	MEGA2400	MEGA3600	MEGA4800
初回使用精製水/L	2-4L	2-4L	4-6L	7-10L	13-17L
1時間あたりの消費量/CC	25	50	100	150	200
① 精製水費用 円/日	5.5	11.0	22.0	33.0	44.0
精製水交換量 L/月	2.0	2.2	6.0	8.0	15.0
② 交換精製水費用/日	14.9	14.9	44.7	59.5	111.7
③ 精製水代計 ①+②	20.4	25.9	66.7	92.5	155.7
定格電流	4A	5A	8A	13A	17A
④ 消費電力 W/H	400	500	800	1300	1700
⑤ 1k W/H	36	36	36	36	36
⑥ 電気代 円/H ④+⑤	14.4	18.0	28.8	46.8	61.2

※精製水10L/2233円 lcc=0.22円

使用1時間あたりのランニングコスト(円)

MEGA600  
34.8円

MEGA1200  
43.9円

MEGA2400  
95.5円

MEGA3600  
139.3円

MEGA4800  
216.9円



サンエイ化学  
株式会社  
ホームページ

## ■ 各資料ダウンロード

■ 水素の持つパワー

■ 水素吸入器の選び方

■ パンフレット

■ 事例

■ 水素濃度測定データー

■ 水素発生量測定方法

■ 製品一覧

■ 水素発生方法

■ 水素濃度測定方法

■ 使用上の注意事項

■ お試し2週間

■ レンタルのご案内



ダウンロードは  
こちら

## ■ 会社概要

水素吸入器の製造・直販メーカー

**MAKE MEDICAL株式会社** 公式LINE：<https://lin.ee/r6uAZQDi>

銀座本社&水素吸入無料体験ショールーム：

〒104-0061 東京都中央区銀座5-14-3 MAKEビル【銀座5丁目ビル】

FACTORY: 〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神531-1

メールアドレス：[info@make-medical.com](mailto:info@make-medical.com) 電話：03-6899-5234



ホームページ



LINE